


Návod k použití

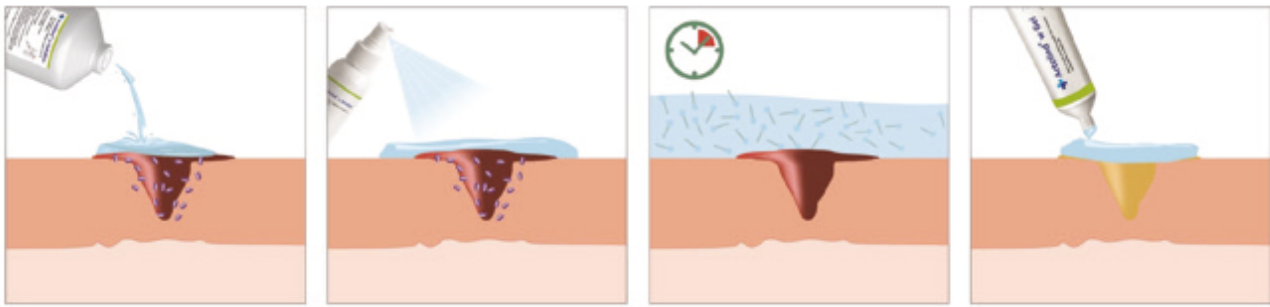

Celá rána a její okolí by měla být důkladně vyčištěna roztokem Actolind® w Solution, aby se minimalizovalo riziko přenosu kontaminantů a mikroorganismů na povrch rány.

Pro optimální vycištění rány se doporučuje navlhčit ránu tvořenou hlubokými a intenzivně nekrotickými tkáněmi, po dobu alespoň 10-15 minut pomocí plně navlhčeného obkladu. (přiložení vlhkého obvazu).

Na vycištěnou ránu naneste Actolind® w Gel a aplikujte krytí nebo obvaz.

Před a po – léčba Actolind®



Produkty: Actolind® W Solution + Actolind® W Gel

Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018 (Consensus Guidelines)

Doporučení pro péči o rány na základě indikace.

Indikace	Antiseptická sloučenina	
	1.volba	2.volba
Rány s rizikem infekce	PHMB	OCT,chlornan,stříbro
Popáleniny	PHMB	OCT,chlornan
Kousnutí,bodná a střelná zranění	PVP-I	chlornan
Rány kolonizované nebo infikované MDRO	OCT/PE	OCT,PHMB, stříbro
Prevence SSI-Infekce v místě chirurgického výkonu	PHMB	OCT/PE
Dekontaminace akutních a nehojících se ran	Chlornan, PHMB	
Peritoneální laváž	chlornan	
Riziko expozice tkáně CNS	chlornan	PVP-I
Rána s nedostatečnou drenáží	chlornan	PHMB



Actolind® w Solution		
PDK kód	Objem	Kód SUKL
3605657	Actolind w Solution 50ml lahev s rozprašovacem	
3605640	Actolind w Solution 250ml lahev s rozprašovacem	5017011
4943719	Actolind w Solution 1000ml lahev	5015397



Actolind® w Gel		
PDK kód	Objem	Kód SUKL
4943701	Actolind w Gel 10ml tuba	
360563	Actolind w Gel 50ml tuba	5015399

VYROBENO:



a German Company



VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR:



CLINIS CZ S.R.O.

KAROLINSKÁ 654/2, 186 00 PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA



WWW.CLINIS-CZ.COM

PÉČE O ZÁKAZNÍKY:

PODPORA@CLINIS-CZ.COM
T: +420 602 702 741




Zdravotnický prostředek třídy III

Polyhexanid

+

Poloxamer

URYCHLUJE HOJENÍ
RAN A POPÁLENIN

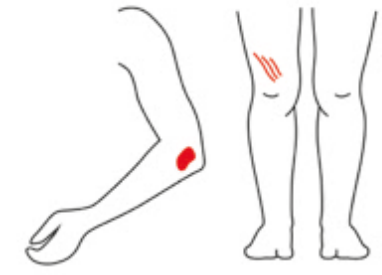



Actolind®

Akutní, nehojící se a infikované rány



Indikace

- + akutní rány
- + pooperační rány
- + rány po plastických operacích
- + poporodní rány a rány po císařském řezu
- + nehojící se rány
- + poraněnou kůži
- + radiační rány
- + popáleniny 1. a 2. stupně a chemické popáleniny
- + rány způsobené elektrickým proudem
- + infikované rány
- + oblasti vstupu urologických katetrů
- + ošetření peristomální kůže, píštělí a abscesů
- + vytvoření bariéry mezi ránou a obvazem

Actolind® w Solution je určený i pro děti *

*Způsobem k nejdostupnějším klinickým informacím by měl být Actolind® w Solution používán u novorozenců a kojenců pouze pod přísným lékařským dohledem.

Doporučení pro použití

- + Actolind® w Solution by měl být používán na povrch rány před jakýmkoli ošetřením
- + Actolind® w Solution lze zahřát na tělesnou teplotu před použitím
- + obvazy, obinadla, polštářky atd., jako např. Actolind® Sterile Gauze Compress, namočené v roztoku Actolind® w Solution mohou být použity k čištění ran.
- + K optimálnímu vyčištění rány se doporučuje zvlhčit infikovanou ránu tvořenou hlubokými a intenzivně nekrotickými tkáněmi po dobu nejmén 10-15 min. plně navlhčeným obkladem
- + Spotřebujte do 8 týdnů po otevření

+ Ochrana

+ Zvlhčení

+ Antimikrobiální efekt

+ Čištění

Zdravotnický prostředek třídy III

CE
2292

Actolind® w Solution

Actolind® w Solution je čistící, vyplachovací, zvlhčující a ošetřující roztok, který se používá spolu se zdravotnickými prostředky, jako jsou obvazy, obinadla, polštářky a výplně při péči o akutní nebo chronické rány a popáleniny 1. a 2. stupně.



Jemný
Vysoce biokompatibilní

- + Neinhibuje granulaci ani epitelizaci
- + Vysoká kompatibilita s tkáněmi
- + Vhodný pro dlouhodobou léčbu
- + Dobře snášen alergiky a diabetiky



Podporující
Účinná péče o rány

Díky synergickému působení poloxameru a polyhexanidu (PHMB).
Doporučovaná a moderní účinná látka v léčbě ran.



Léčivý
Poskytuje zvlhčení a péči

- + Udržuje povrch rány čistý a vlhký
- + Zvyšuje účinnost obvazu
- + Zabraňuje ulpívání mikroorganismů
- + Urychluje hojení ran a popálenin

Actolind® w Gel

Actolind® w Gel je ochranný, dekontaminační, zvlhčující a ošetřující gel, který se používá spolu se zdravotnickými prostředky, jako jsou obvazy, obinadla, polštářky a výplně při péči o akutní nebo chronické rány a popáleniny 1. a 2. stupně.



Jemný
Vysoce biokompatibilní

- + Neinhibuje granulaci ani epitelizaci
- + Vysoká kompatibilita s tkáněmi
- + Vhodný pro dlouhodobou léčbu
- + Dobře snášen alergiky a diabetiky



Podporující
Účinná péče o rány

Díky synergickému působení poloxameru a polyhexanidu (PHMB).
Doporučovaná a moderní účinná látka v léčbě ran.



Léčivý
Poskytuje zvlhčení a péči

- + Udržuje povrch rány čistý a vlhký
- + Zvyšuje účinnost obvazu
- + Zabraňuje ulpívání mikroorganismů
- + Urychluje hojení ran a popálenin



Efektivní
Chrání ránu a okolí rány

velmi účinně odstraňuje nečistoty, strupy, nekrotickou tkáň a biofilm tím, že snižuje povrchové napětí.



Dermatologicky testovaný
Nedráždí ani nebolí

- + Kompatibilní se sliznicemi
- + Nevývolává senzibilizaci



Ochranný
Poskytuje antimikrobiální ochranu

- + Zabraňuje možným opakovaným infekcím
- + Zabraňuje tvorbě biofilmů
- + Vysoce účinný proti multirezistentním organismům (MRSA, VRE) a mykotickým patogenům (C. Albicans).



Přívětivý pro pacienty
Čistí a umožňuje

Atraumatickou výměnu obvazu přilepeného k ráně.

Actolind w Solution stačí aplikovat cca 5 minut pro rozpuštění inkrustací na ráně.



Efektivní
Chrání ránu a okolí rány

- + Vytvoří na nanesené ploše tenkou ochrannou vrstvu.
- + Poskytuje nepřetržitě zvlhčení a ochranu před infekcemi.
- + Minimalizuje růst mikroorganismů na povrchu obvazu.



Dermatologicky testovaný
Nedráždí ani nebolí

- + Kompatibilní se sliznicemi
- + Nevývolává senzibilizaci



Ochranný
Poskytuje antimikrobiální ochranu

- + Zabraňuje kolonizaci patogeny
- + Zabraňuje možným opakovaným infekcím
- + Zabraňuje tvorbě biofilmů
- + Vysoce účinný proti multirezistentním organismům (MRSA, VRE) a mykotickým patogenům (C. Albicans).



Přívětivý pro pacienty
Pohodlná a bezbolestná výměna obvazů

- + Vytváří bariéru mezi povrchem rány a obvazem.
- + Vyplňuje prostor mezi povrchem rány a obvazem.
- + Minimalizuje přilnavost obvazů k povrchu rány.
- + Umožňuje atraumatickou výměnu obvazového materiálu.



získejte více informací z našeho produktového videa



CE
2195

Indikace

- + akutní rány
- + pooperační rány
- + nehojící se rány
- + poraněnou kůži
- + radiační rány
- + popáleniny 1. a 2. stupně a chemické popáleniny
- + rány způsobené elektrickým proudem
- + infikované rány
- + oblasti vstupu urologických katetrů
- + ošetření peristomální kůže, píštělí a abscesů
- + vytvoření bariéry mezi ránou a obvazem

Actolind® w Gel je určený i pro děti *

*Způsobem k nejdostupnějším klinickým informacím by měl být Actolind® w Gel používán u novorozenců a kojenců pouze pod přísným lékařským dohledem.

Vlastnosti výrobku

- + Actolind® w Gel chrání a zvlhčuje povrch rány.
- + vytváří ochrannou vrstvu mezi povrchem rány a obvazem a mechanicky zabraňuje adhezi patogenních látek k ráně.
- + Actolind® w Gel chrání ránu před vnějšími vlivy tím, že na povrchu rány vytváří tenkou ochrannou vrstvu.
- + vyplňuje prostor mezi povrchem rány a obvazem a zvyšuje tak účinnost obvazu.
- + také zabraňuje přilnutí obvazového materiálu k ráně.

Účinek přípravku Actolind w Gel se zvyšuje v kombinaci s použitím roztoku

+ Ochrana

+ Zvlhčení

+ Antimikrobiální efekt

+ Hojení

Zdravotnický prostředek třídy III